

Étalonner le pH-mètre en 5 étapes

MIMÉLEC
The good sciences

Un pH-mètre ne mesure juste que s'il vient d'être étalonné : l'électrode vieillit.

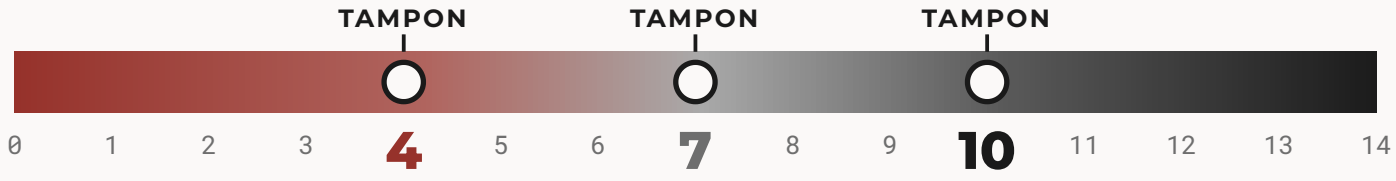


1 Tampon pH 7

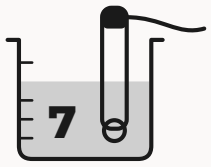


Toujours **commencer par le tampon pH 7**.

2 Rinçage

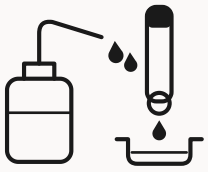


Rincer l'électrode **à l'eau déminéralisée** entre deux tampons.

3 Tampon pH 4

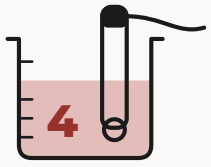


Deux points au minimum, qui encadrent la valeur attendue.

4 Tampon pH 10

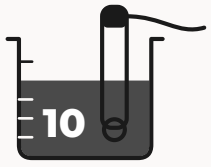

Troisième point (pH 4, 7 et 10) pour une large plage.

5 Lecture de la pente

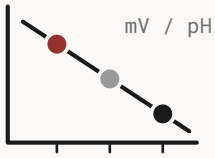


Lire la **pente affichée**, en % : elle dit l'état de l'électrode.

LA PENTE

59,16 mV

par unité de pH à 25 °C : pente théorique.

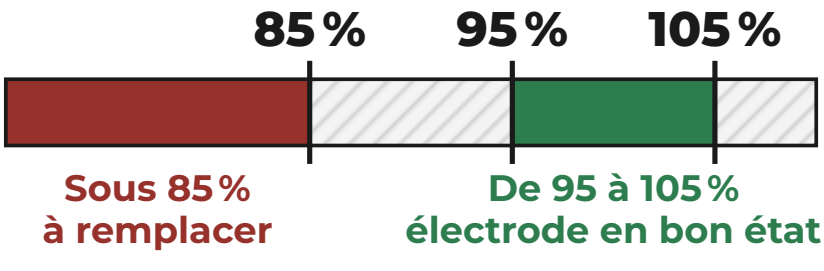

⚠ **Ne jamais reverser un tampon utilisé dans son flacon.**

MIMÉLEC · ZA du Moulin d'Écalles · 76690 La Rue-Saint-Pierre

THE GOOD SCIENCES