
4 erreurs qui faussent votre pH-mètre

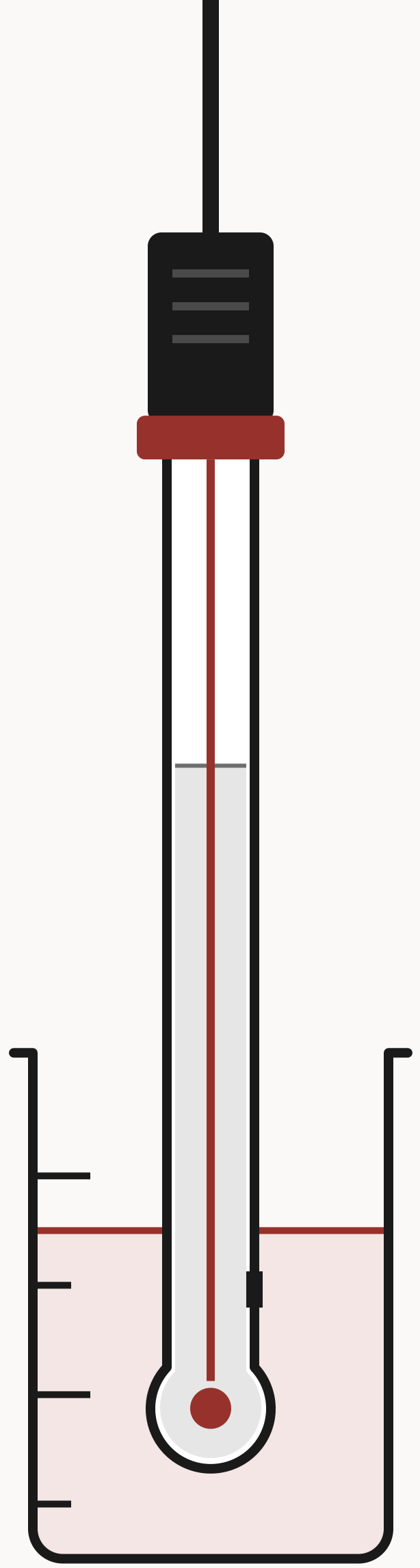


> Un pH-mètre ne mesure juste que s’il vient d’être étalonné : l’électrode vieillit.

FAITES DÉFILER →

ERREUR

1

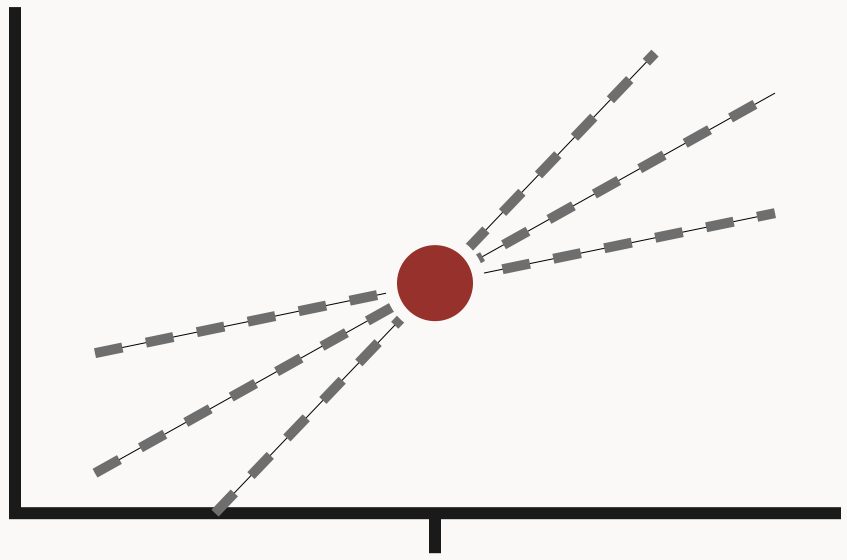

Étalonner sur un seul point


LA BONNE PRATIQUE

Deux points au minimum, qui encadrent la valeur attendue.

Trois points (pH 4, 7 et 10) pour une large plage. Commencer par le tampon pH 7.

ERREUR

2

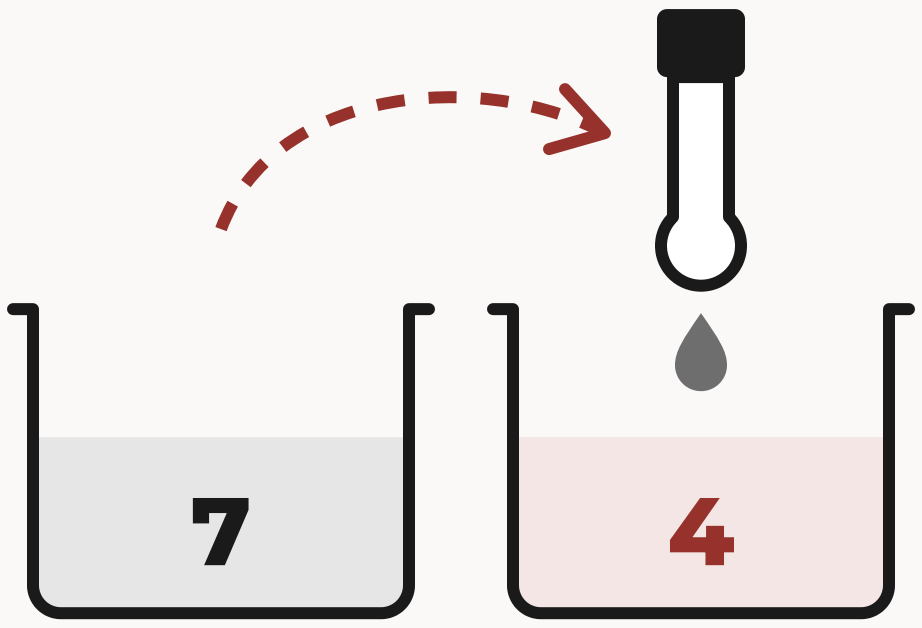


Ne pas rincer l’électrode entre deux tampons

LA BONNE PRATIQUE

Rincer l’électrode à l’eau déminéralisée entre deux tampons.

ERREUR

3

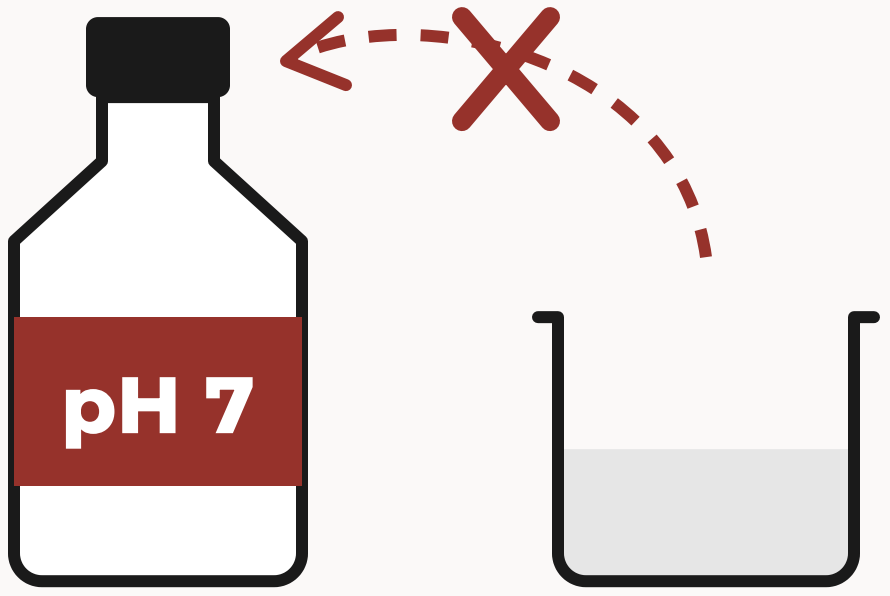


Reverser le tampon dans son flacon

LA BONNE PRATIQUE

Un tampon utilisé ne retourne jamais dans son flacon.

ERREUR

4

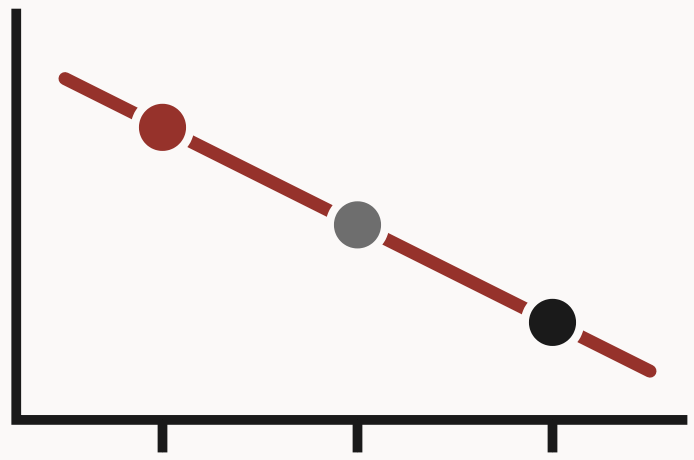

Ignorer la pente

LA BONNE PRATIQUE

Lire la pente affichée : de 95 à 105 %, électrode en bon état.

Sous 85 % : à remplacer (recommandation de fabricants). Pente théorique : 59,16 mV par unité de pH à 25 °C.